

MultiCore®

Jetzt auch in der
10g Automixspritze!

**2 Konsistenzen
SIE ENTSCHEIDEN!**

competence in composites®



Selbsthärtendes Stumpfaufbau-Composite mit optionaler Lichthärtung

MultiCore®


Für jede **Technik** die passende Konsistenz

Das selbsthärtende Stumpfaufbau-Composite MultiCore mit der Option zur Lichthärtung bringt Flexibilität in Ihre Praxis.

Zwei Konsistenzen, zwei Techniken, zwei Aushärtungsmethoden und drei Farben bilden das optimale Fundament für den Wiederaufbau koronal teil- und tiefzerstörter, vitaler oder devitaler Zähne.

Für die Modellier-Technik:

Hochviskoses MultiCore HB

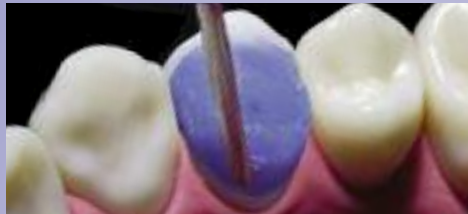

Wer gerne frei modelliert, wird von MultiCore HB begeistert sein. Dank seiner festen Konsistenz eignet sich das hochviskose Material hervorragend für den Stumpfaufbau. Durch seine hohe Endhärte lässt sich MultiCore HB wie Dentin beschleifen.

Für die Matrizen-Technik:

Fließfähiges MultiCore Flow




Bei bevorzugter Matrizen-Technik für Aufbaufüllungen steht mit MultiCore Flow ein fließfähiges Stumpfaufbau-Composite zur Verfügung.

Eine weitere Anwendung von MultiCore Flow ist die adhäsive Befestigung von glasfaser-verstärkten Wurzelstiften wie z.B. FRC Postec Plus.



Kein Kleben

Das Material lässt sich mit entsprechenden Applikationsinstrumenten angenehm mischen, applizieren und modellieren. MultiCore HB klebt dabei nicht am Instrument und ist sehr einfach in die gewünschte Form zu bringen.

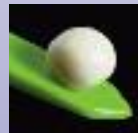

Praktische Automischkanüle


Das Kartuschensystem mit Automischkanüle und Intraoral Tip mischt schnell und sorgt für zielgenaue Applikation. MultiCore Flow fließt sehr gut an die gebondete Dentineoberfläche an und überzeugt durch einen festen Verbund zur verbliebenen Zahnhartsubstanz.

Basierend auf langjähriger Erfahrung

Die langjährige Erfahrung von Ivoclar Vivadent im Bereich der Composite-Technologie dokumentiert sich in erfolgreichen Produkten wie z.B. Tetric.

Basierend auf diesem Know-How zeichnet sich auch MultiCore durch überzeugende physikalischen Eigenschaften aus.


* Keine eingetragenen Marken von Ivoclar Vivadent

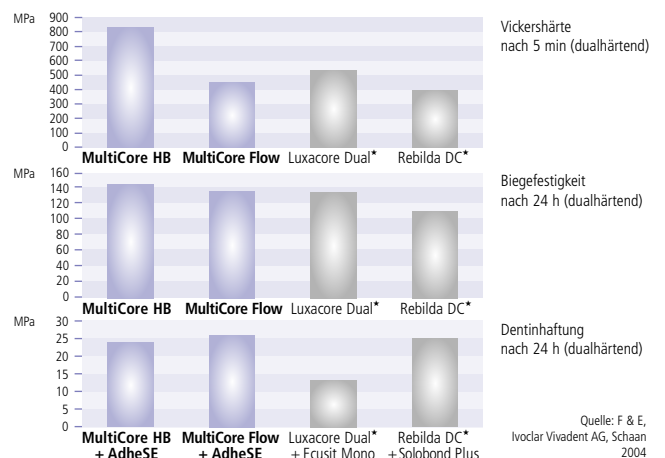

MultiCore®

Für jede **Anwendung** die richtige **Auswahl**

Selbst- oder Lichthärtung

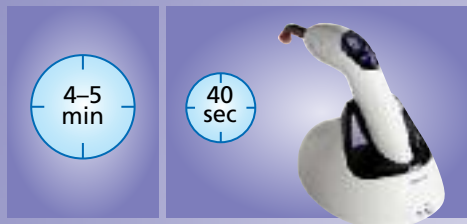

MultiCore ist ein selbsthärtendes Composite (Aushärtung in 4 – 5 min), bei dem Sie durch Lichthärtung (40 sec pro Fläche) die Aushärtung aktiv beeinflussen können.

Das Material lässt sich so im Bulk platzieren. Und es liegt in Ihrer Hand, die Aushärtungszeit nach Wunsch zu verringern.

Verschiedene Farben

light	medium
white	blue

Das Spektrum von MultiCore umfasst die Farben light, medium, white und blue.

Dadurch haben Sie die Möglichkeit, für jede prothetische Restauration die passende Basis zu schaffen – sei es für Metall-, Verblend- oder Vollkeramikkronen.

Das geeignete Adhäsiv

In Kombination mit dem selbstätzenden Adhäsiv AdheSE, bzw. AdheSE DC bildet MultiCore ein abgestimmtes System für gute, reproduzierbare Ergebnisse.



Selbstverständlich können Sie auch die bewährten Adhäsive Syntac, ExcITE und ExcITE DSC von Ivoclar Vivadent verwenden.

Dokumentiert im klinischen Erfolg

Stumpfaufbau mit MultiCore HB



Auftragen von AdheSE



Modellieren von MultiCore HB



Fertige Aufbaufüllung

Stumpfaufbau mit MultiCore Flow



Auftragen von AdheSE



Applikation von MultiCore Flow



Fertige Aufbaufüllung

Stumpfaufbau-Composite in 2 Konsistenzen

Lieferformen

Refill MultiCore Flow 50 g

Kartusche

1 Kartusche à 50 g
Zubehör

Erhältlich in den Farben:
light, medium und blue

Refill Manual Dispenser

1 Manual Dispenser 25 ml, 1:1

Refill Mixing Tips

50 Mischkanülen für Kartusche

Refill Intraoral Tips

50 Intraoral Tips für Kartusche

Refill MultiCore Flow 10 g

Automixspritze

1 Automixspritze à 10 g
Zubehör

Erhältlich in den Farben:
light, medium und white

Refill Mixing Tips small

10 Mixing Tips für Automixspritze

Refill Intraoral Tips small

10 Intraoral Tips für Automixspritze

Refill MultiCore HB

2 Spritzen Base à 4 g
2 Spritzen Katalysator à 4 g
1 Mischblock
5 Mischspatel
Zubehör

Erhältlich in den Farben:
light, medium und blue

