

PiezoLED™

Prophylaxe und Implantatreinigung

KaVo PiezoLED Spitzen Übersicht



KAVO

PROPHYLAXE



PIEZO Scaler Spitzen

Für die Entfernung von supra- und subgingivalen Konkrementen in allen Quadranten

Anwendung in Zahnzwischenräumen, im Sulcusbereich und auf Wurzeloberflächen

Effektive und zeitsparende Zahnsteinentfernung und Prophylaxebehandlung

Ebenfalls passend für **PIEZOSOFT**



PIEZO Scaler Tip 201

Universelle Scaling-Spitze

- Für die Entfernung von supragingivalem Zahnstein:
 - von bleibenden Zähnen
 - von Zahnhartgewebe: Zahnschmelz
- Von der Inzisalkante zum Sulcusbereich arbeiten
- Tangential zum Zahn anwenden
- Nur die ersten 2-3 mm der Spitze einsetzen



Mat.-Nr. 1.007.4024

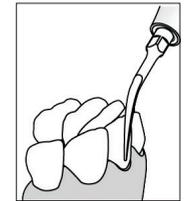
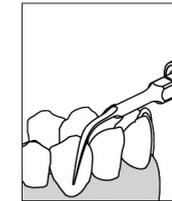


PIEZO Scaler Tip 202

- Für die Entfernung von supra- und subgingivalem Zahnstein in bis zu 4 mm tiefen Taschen:
 - von bleibenden Zähnen
 - von Zahnhartgewebe: Zahnschmelz
- Insbesondere für Zahnzwischenräume und den Sulcusbereich
- Tangential zum Zahn anwenden
- Nur die ersten 2-3 mm der Spitze einsetzen



Mat.-Nr. 1.007.4026

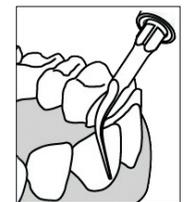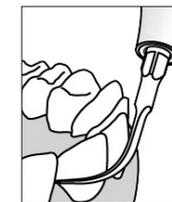


PROPHYLAXE


PIEZO Scaler Tip 203

Filigrane Paro Spitze

- Für die Entfernung von supra- und subgingivalem Zahnstein in bis zu 10 mm tiefen Taschen:
 - von Milchzähnen und bleibenden Zähnen
 - von Zahnhartgewebe: Zahnschmelz, Dentin und Zement
 - von Restaurationen, Prothesen und Zahnersatz
 - rund um kieferorthopädische Apparaturen
- Für tiefe Zahntaschen und parodontale Kontrollbehandlungen geeignet
- Tangential zum Zahn anwenden
- Nur die ersten 2-3 mm der Spitze einsetzen
- Sanfte Behandlung, auch geeignet für Kinder

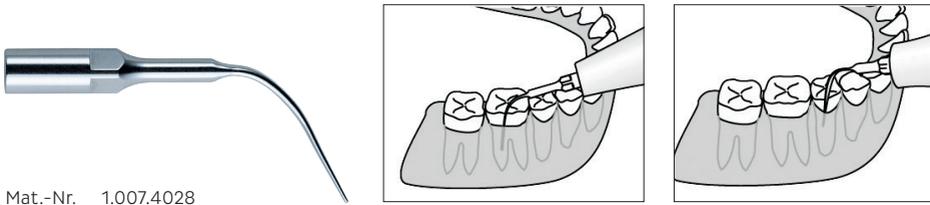

Mat.-Nr. 1.007.4028

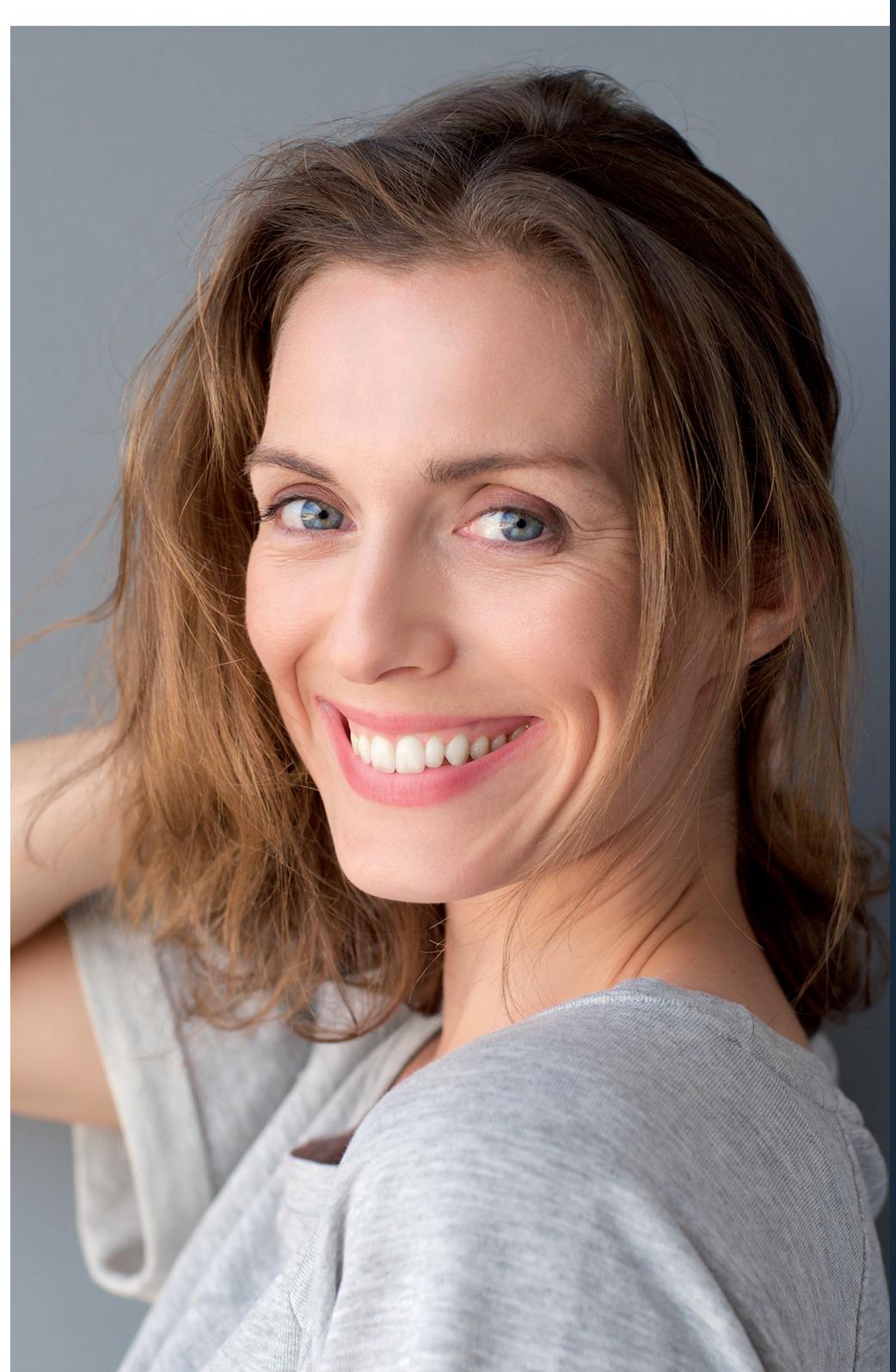

IMPLANTREINIGUNG



PIEZO Implant Tip Set

Für die effiziente Reinigung von Implantaten

Metallfreie Spitze verhindert die Beschädigung der Implantathülse

Sehr saubere Oberflächen ohne Aufrauung



Ebenfalls passend für **PIEZOssoft**

PIEZO Implant Tip Set

- Für die Entfernung von supra- und subgingivalem Zahnstein in bis zu 3 mm tiefen Taschen:
- von Milchzähnen und bleibenden Zähnen
- von Zahnhartgewebe: Zahnschmelz und Dentin
- von Restaurationen, Prothesen und Zahnersatz
- rund um Implantate
- rund um kieferorthopädische Apparaturen
- Metallfreie Spitze
- 50 Anwendungen pro Aufsatz



Mat.-Nr. 1.007.4008
Refill Tip Set: 1.007.4014

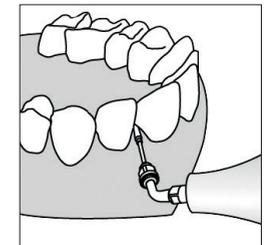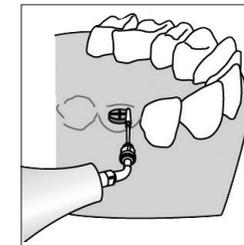

Material	Bezeichnung	PIEZO soft	Piezo LED	Inhalt
PIEZO Scaler Spitzen				
1.007.4004	PIEZO Scaler Tip Set	●	●	3 PIEZO Scaler Spitzen (je einmal Nr. 201, 202, 203 mit Drehmomentschlüssel) 6er Steribox Verschleißmesskarte
1.007.4024	PIEZO Scaler Tip 201	●	●	
1.007.4026	PIEZO Scaler Tip 202	●	●	
1.007.4028	PIEZO Scaler Tip 203	●	●	
PIEZO Implant Spitzen				
1.007.4008	PIEZO Implant Tip Set	●	●	Halter für PIEZO Implant Tips Schlüssel für PIEZO Implant Tip Halter 4 Aufsätze
1.007.4014	PIEZO Implant Refill Tip Set	●	●	4 Aufsätze

90099850 de 12/22 REV2 © Copyright KaVo Dental GmbH.



Hinweis PiezoLED:

Bitte beachten Sie unsere Einstellungsempfehlungen für die Spitzen